



3B Scientific présente

**SEIRIN®**

TYPE B

TYPE J

TYPE L

PYONEX

NEW PYONEX

**3B SCIENTIFIC®**

**ACUPUNCTURE**

*...going one step further*


先擲起死回生湯劑之真及乎經曰滿其內銀表治其  
 外則高無過蓋不可偏廢者如此自如後而未以醫名家  
 若未嘗差之後等此而為二本不素習卒豫實視故也其  
 何以致十全之功長天聖中尚藥王惟一創為之武鑄銅  
 以象人內分藏腑旁注經各井榮所會孔穴而安竅而達  
 中刻記之則名為銅人輸穴鍼灸圖經其後又有石版

將此經絡... 曾經絡... 三焦經絡... 小腸經絡

將此經絡... 曾經絡... 三焦經絡... 小腸經絡

用者復按其狀繪為正背明堂二圖十二經絡各以其  
 色指之... 曾仕二款則以絲色塗之  
 學者殆不可不知也歷紀寢連經絡氣化不能莫堯堯  
 之蓋乎先英特六散之首闢在傳矣報因此因之曰承  
 黃帝則堂正經參致校定遂復其真既而思之曰吾其  
 自於以誌吾說不與海內濟人博覽致謹以結德同

# 經絡

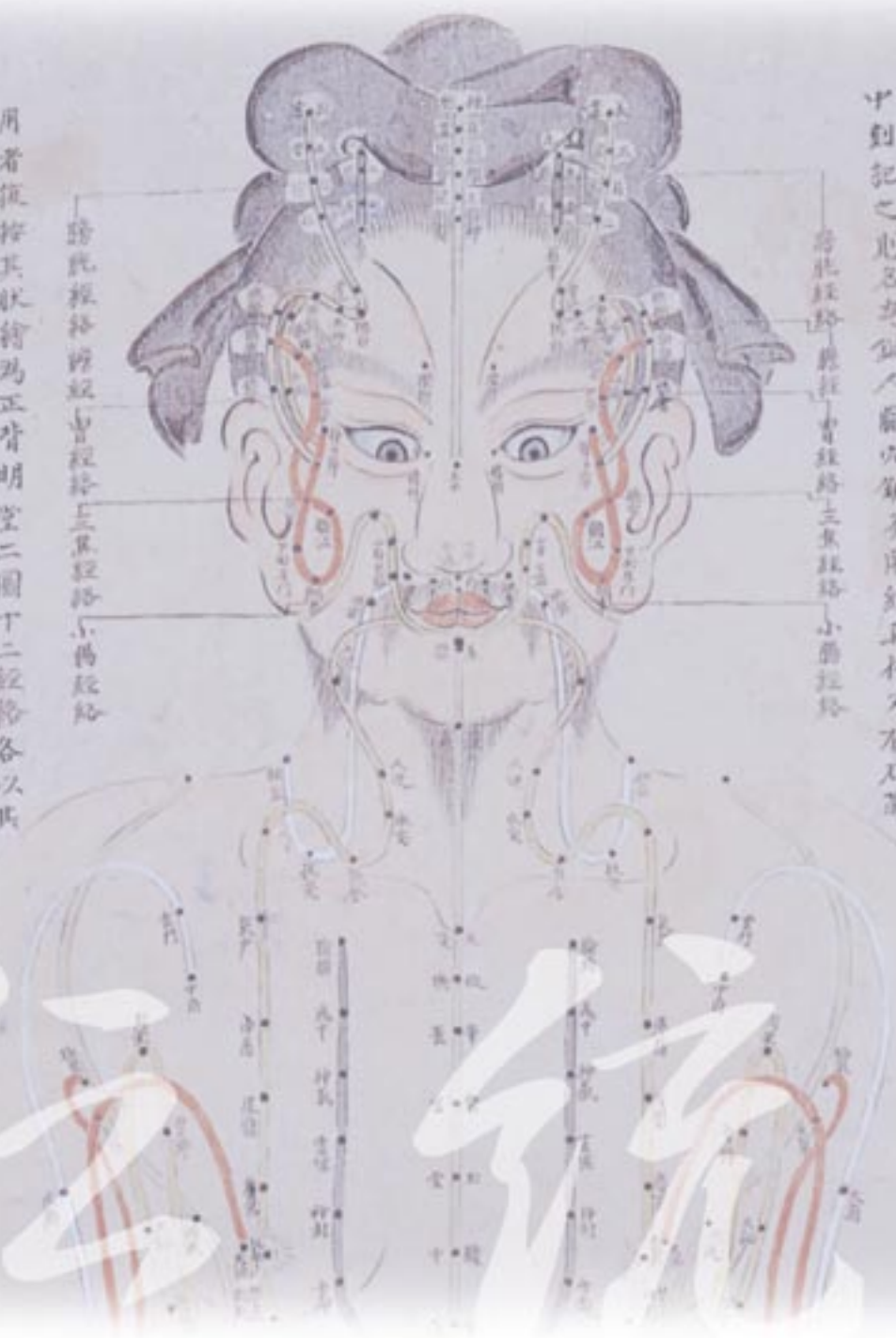

手厥陰心包經終地

# La Qualité facteur de Confiance

L'acupuncture, faisant partie d'une approche médicale globale, est étroitement liée à la philosophie et culture chinoises. Son histoire commence bien avant notre ère.

Le succès de l'acupuncture en Europe, qui a commencé au 20<sup>e</sup> siècle, ressemble en tout point au succès de la marque SEIRIN®.

La marque SEIRIN® qui symbolise une qualité incomparable n'est pas sans raison le numéro un sur le marché, ce qui en fait le complément parfait à la palette de produits 3B Scientific®.

Beaucoup d'acupuncteurs conscients du besoin de sécurité et fiabilité font confiance à SEIRIN®. Le traitement presque sans douleur et sans stress avec les aiguilles SEIRIN® est hautement apprécié, car la plus haute précision et les caractéristiques exceptionnelles des matériaux assurent un support optimum lors du travail journalier.

Les utilisateurs dans le monde entier font confiance à SEIRIN® depuis des décennies. – Faites, vous aussi, confiance à SEIRIN®.





## TYPE B

**LA PRÉFÉRÉE.** Depuis des décennies, les aiguilles d'acupuncture SEIRIN® de type B sont leaders sur le marché. Elles sont faites d'acier inoxydable spécial et leur pointe est aiguisée au diamant, polie trois fois et recouverte d'une pellicule extrêmement fine de silicone, ce qui rend la piqûre particulièrement facile et ménage les patients.


La fabrication des manches respecte l'ergonomie de l'utilisateur ; la forme optimum et précise des manches assure l'utilisation sûre et confortable. Le manche d'aiguille de type B est fait en polypropylène, qui est un matériau favorable à l'environnement.

L'aiguille de type B est produite dans des diamètres et longueurs variés. Un tableau présentant la gamme des produits se trouve sur le rabat de la jaquette arrière.



Ø x Longueur
0,20 x 15 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm
0,35 x 50 mm



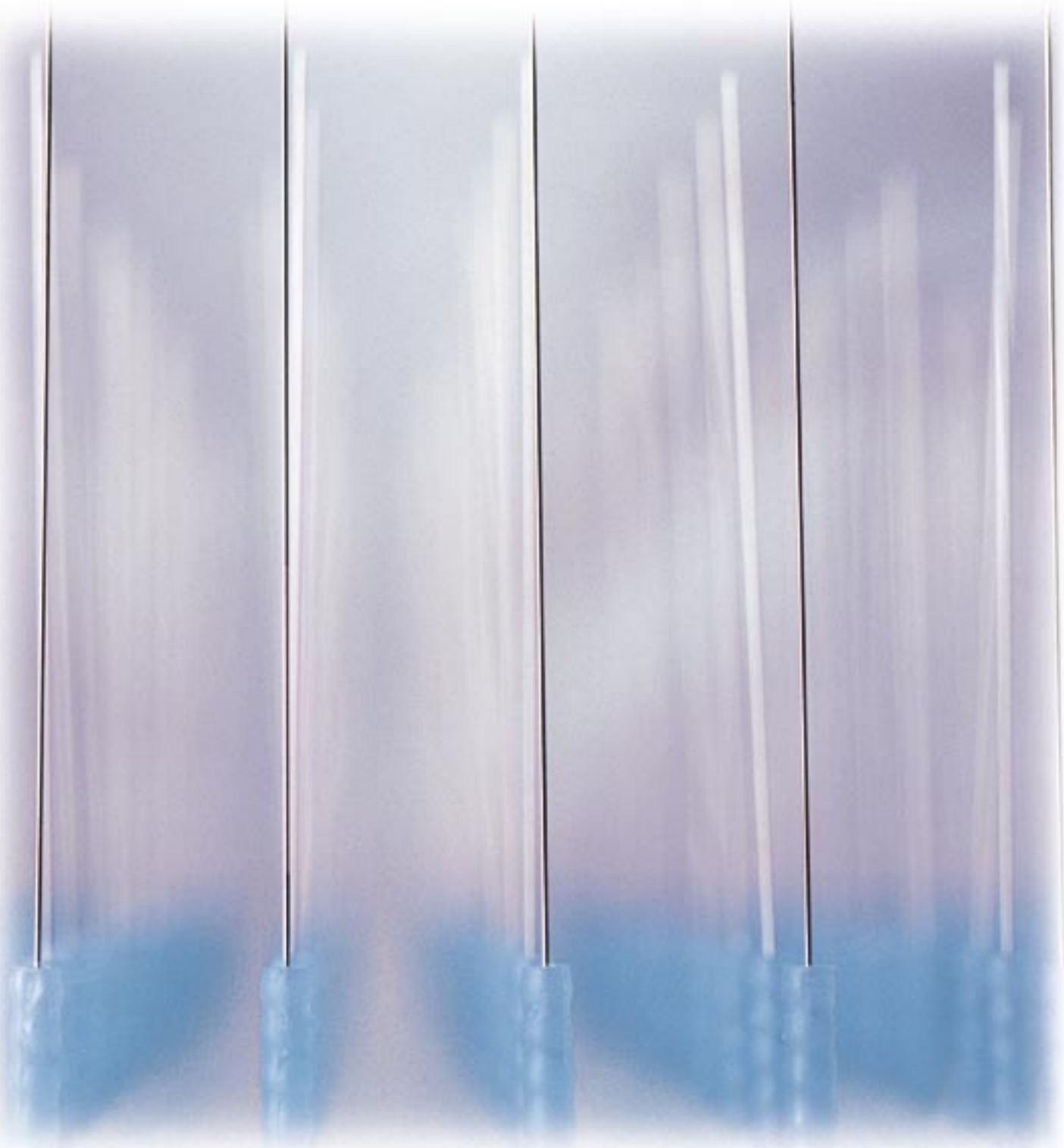

# TYPE J

**IMPECCABLEMENT DOUCE.** L'insertion particulièrement douce des aiguilles SEIRIN® de type J est rendue possible par l'applicateur fourni avec les aiguilles. Les bords arrondis de l'applicateur assurent une insertion agréable et sans douleur. Les aiguilles SEIRIN® de type J en acier inoxydable ont la finesse des cheveux, ce qui permet l'insertion particulièrement douce par légers tapements. Le centrage précis de l'aiguille dans le manche en plastique facile à manier assure l'insertion précise lors du traitement.

Chaque aiguille est dotée d'un manche de couleur propre se référant à sa longueur et à son diamètre. Un tableau présentant la gamme des produits se trouve sur le rabat de la jaquette arrière.

**Attention :** Le type C a été modifié et s'appelle désormais type J pour la simple raison que la seule différence entre les types C et J était l'emballage. Tous les emballages des aiguilles éprouvées SEIRIN® de type J ou type C sont maintenant unifiés dans le monde entier. De par leur longue durée de vie, il est possible que des aiguilles de type C soient encore commercialisées pendant quelques années.



Ø x Longueur
0,12 x 30 mm
0,14 x 30 mm
0,16 x 30 mm
0,16 x 40 mm
0,18 x 30 mm
0,18 x 40 mm
0,20 x 30 mm
0,20 x 40 mm
0,20 x 50 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,25 x 50 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm




# TYPE L

LA NOUVELLE AIGUILLE TOUT EN MÉTAL. Chaque aiguille SEIRIN® de type L est intégralement en acier inoxydable et particulièrement bien adaptée à la stimulation électrique ainsi qu'à la moxibustion. Elle est fournie dans un applicateur en plastique ; elle est stérile et emballée sous blister. Grâce à l'applicateur, l'aiguille de type L glisse très doucement dans la peau du patient et aide le thérapeute à appliquer le traitement sans douleur

Chaque aiguille de type L est dotée d'un manche de couleur propre se référant à sa longueur et à son diamètre. Un tableau présentant la gamme des produits se trouve sur le rabat de la jaquette arrière.



Ø x Longueur
0,20 x 30 mm
0,20 x 40 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,25 x 60 mm
0,30 x 60 mm

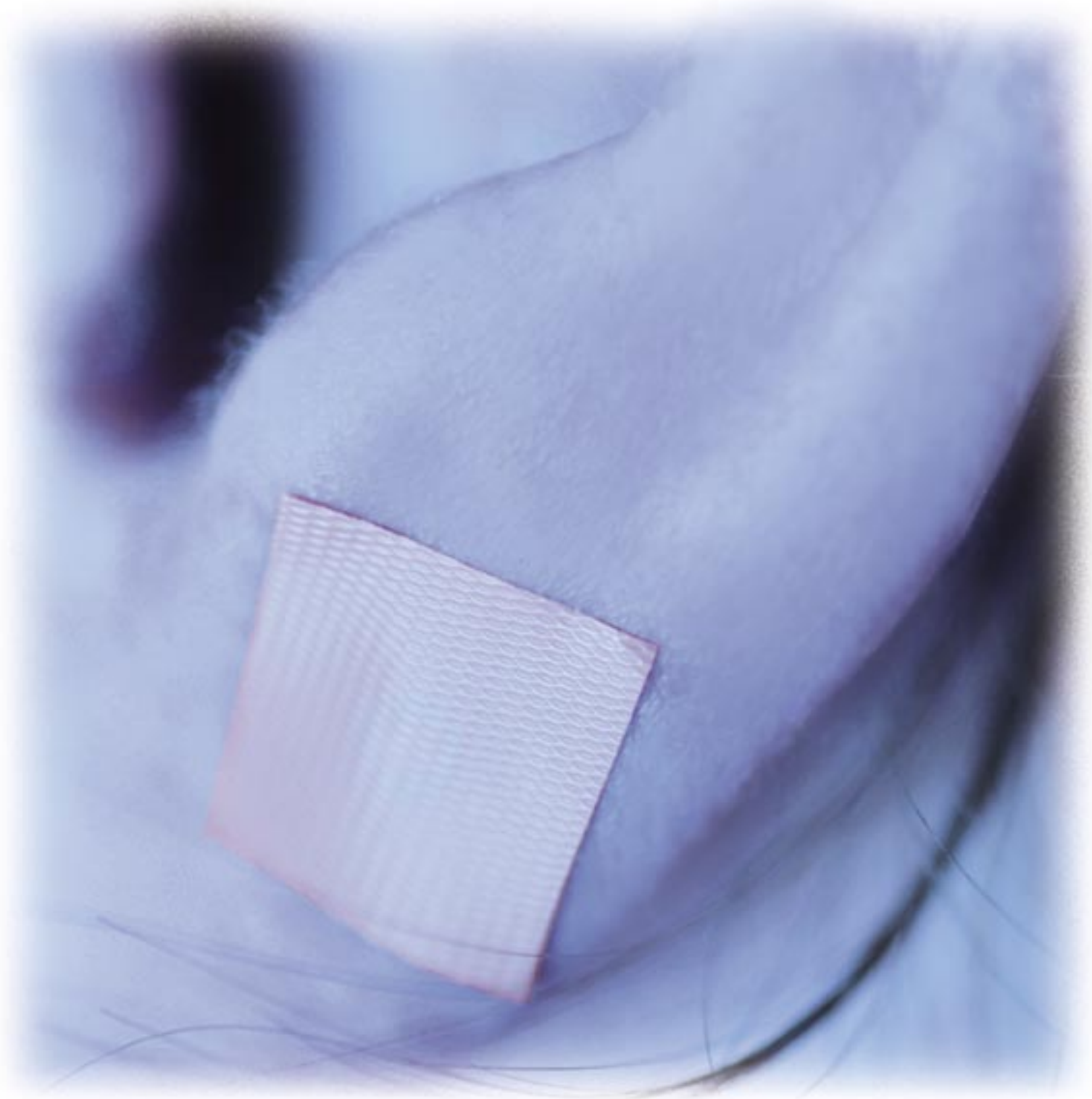

PYONEX

PYONEX

L'AIGUILLE PERMANENTE QUI A FAIT SES PREUVES. Les aiguilles SEIRIN® PYONEX ont été élaborées spécialement pour l'acupuncture permanente. Contrairement aux aiguilles de type B et J, les aiguilles PYONEX sont fixées sur la surface cutanée par légère pression. Les aiguilles PYONEX consistent en une prise annulaire, sur laquelle un pansement de haute qualité dermatologique est appliqué. Le petit pansement couleur peau de 10 x 10 mm permet un positionnement sûr et permanent.

Les aiguilles PYONEX sont livrées par 10 dans un petit écrien en plastique qui les protège pendant le transport et sont disponibles en trois longueurs – voir le rabat de la jaquette arrière.



Ø x Longueur

0,22 x 1,6 mm

0,24 x 1,7 mm

0,26 x 1,8 mm



NEW PYONEX

L'AIGUILLE PERMANENTE DANS SA NOUVELLE ROBE. Cette nouvelle aiguille permanente de SEIRIN® est disponible en 4 coloris différents qui les codent selon leur longueur. Les aiguilles de ce type s'utilisent pour le corps et les oreilles. Elles sont sûres, hygiéniques et leur utilisation est extrêmement facile. Le pansement qui laisse la peau respirer, permet la fixation exacte et permanente après l'insertion en douceur de l'aiguille PYONEX. La stimulation de l'aiguille permanente se fait par pression du doigt sur le pansement et un point de stimulation ancré dans le pansement, qui est facile à percevoir.

La NEW PYONEX est aussi disponible dans des tailles particulièrement petites, ce qui la rend spécialement adaptée aux enfants et aux patients sensibles à la douleur. Un tableau présentant la gamme des produits se trouve sur le rabat de la jaquette arrière.



Ø x Longueur

0,2 x 0,6 mm

0,2 x 0,9 mm

0,2 x 1,2 mm

0,2 x 1,5 mm

NEW PYONEX





## OREILLE D'ACUPUNCTURE

INCROYABLEMENT RÉALISTES. Les experts du monde entier s'accordent pour le dire : ces reproductions fidèles du pavillon de l'oreille humaine sont d'une qualité extraordinaire. Elles ne devraient jamais manquer dans un cours d'acupuncture.

Les oreilles d'acupuncture SEIRIN® fabriquées en taille originale par 3B Scientific sont façonnées dans du silicone SKINlike™ – un garant de sa longévité, sa surface remarquablement réaliste, et ses qualités de ponction phénoménales.



N15 – Jeu d'oreilles d'acupuncture SEIRIN®

N15/1L – oreille d'acupuncture SEIRIN®, gauche

N15/1R – oreille d'acupuncture SEIRIN®, droite

N16 – Ensembles d'oreilles d'acupuncture

SEIRIN®, 20 pièces

OREILLE D'ACUPUNCTURE



# Médecine & Sciences Naturelles

Depuis 2004, les marques 3B Scientific® et SEIRIN® sont étroitement liées. En reprenant les droits pour la distribution des prestigieux produits SEIRIN® dans toute l'Europe, 3B Scientific a judicieusement élargi sa gamme de produits et réaménagé l'organisation de son pôle Acupuncture.

La reste de la gamme de produits englobe modèles anatomiques, logiciels et planches didactiques, des mannequins de simulation de soins et de réanimation, des outils de thérapie du patient, ainsi qu'une large gamme de matériel didactique pour l'enseignement de la biologie et la physique. La marque 3B Scientific® est présente dans les domaines de la médecine, de la biologie et de la physique dans plus de 100 pays du monde entier.


Le groupe international 3B Scientific est le plus grand fabricant de matériel pédagogique au monde. La première usine du groupe a débuté son activité en 1819 à Budapest. Le succès constant et croissant de 3B Scientific est le résultat d'un développement continu dans la fabrication et la vente de produits médico-scientifiques à des prix abordables pour le client. Avec l'aide de nos partenaires commerciaux, nous donnons vie aux 3 « B » du nom de notre société :

BEST QUALITY

BEST VALUE

BEST SERVICE



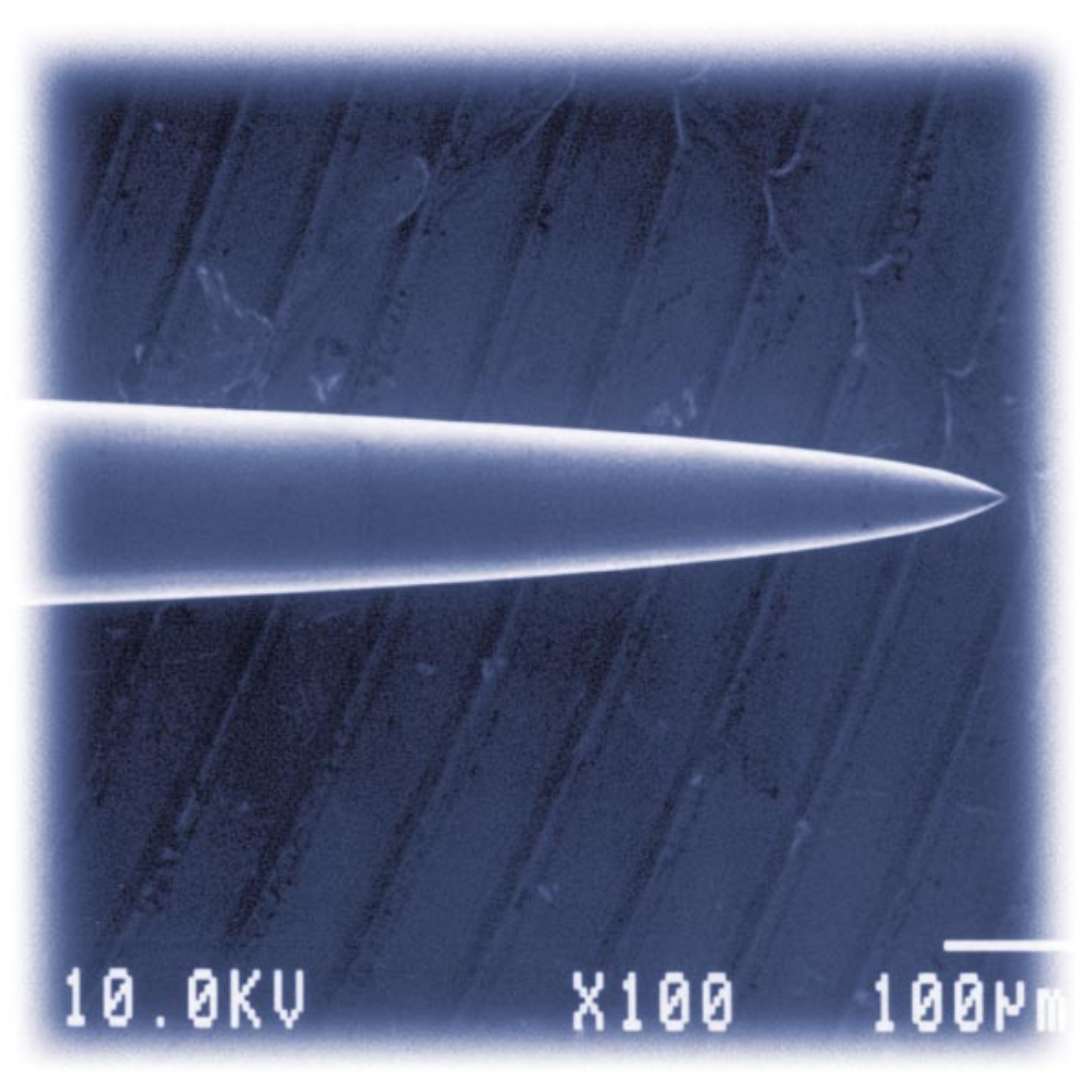

10.0KV

X100

100µm

Quand la

# Qualité

devient un

# Critère

Critère

La marque SEIRIN® signifie aussi « Good Manufacturing Practice », c'est à dire un haut standard de fabrication. Les critères d'exigences fixés sont donc, depuis l'origine, orientés selon les critères de qualité de production du Shimizu japonais.

Les procédés de fabrication et de contrôle sont en grande partie automatisés et assurent continuellement l'exactitude, la pureté et la stérilité des produits au niveau le plus élevé. Chacune des étapes de la production est soumise aux contrôles les plus exigeants. A commencer par l'examen visuel des matériaux bruts en passant par 8 contrôles de qualité extrêmement sévères pour en arriver aux tests en laboratoire, tout est mis en œuvre pour que la qualité des aiguilles d'acupuncture SEIRIN® reste la même et continue à offrir le niveau élevé de sécurité et de fiabilité pour lequel elle sont connues.

Bien sûr, tous les produits SEIRIN® sont contrôlés CE et conformes aux standards de qualité et de sécurité des TÜV, ISO 9002 et de l'OMS.



AIGUILLE D'ACUPUNCTURE SEIRIN®

Art. No.	Description	ø x Longueur	Coloris
S-B2015	Aiguille SEIRIN® de Type B	0,20 x 15 mm	bleu
S-B2540	Aiguille SEIRIN® de Type B	0,25 x 40 mm	pourpre
S-B3030	Aiguille SEIRIN® de Type B	0,30 x 30 mm	marron
S-B3050	Aiguille SEIRIN® de Type B	0,30 x 50 mm	marron
S-B3550	Aiguille SEIRIN® de Type B	0,35 x 50 mm	noir
S-J1230	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,12 x 30 mm	vert foncé
S-J1430	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,14 x 30 mm	vert clair
S-J1630	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,16 x 30 mm	rouge
S-J1640	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,16 x 40 mm	rouge
S-J1830	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,18 x 30 mm	ivoire
S-J1840	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,18 x 40 mm	ivoire
S-J2030	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,20 x 30 mm	bleu
S-J2040	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,20 x 40 mm	bleu
S-J2050	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,20 x 50 mm	bleu
S-J2530	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,25 x 30 mm	pourpre
S-J2540	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,25 x 40 mm	pourpre
S-J2550	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,25 x 50 mm	violet
S-J3030	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,30 x 30 mm	marron
S-J3040	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,30 x 40 mm	marron
S-J3050	Aiguille SEIRIN® de Type J	0,30 x 50 mm	marron
S-L2030	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,20 x 30 mm	bleu
S-L2040	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,20 x 40 mm	bleu
S-L2530	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,25 x 30 mm	pourpre
S-L2540	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,25 x 40 mm	pourpre
S-L2560	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,25 x 60 mm	pourpre
S-L3060	Aiguille SEIRIN® de Type L	0,30 x 60 mm	marron
S-PS	SEIRIN® PYONEX SMALL	0,22 x 1,6 mm	blanc
S-PM	SEIRIN® PYONEX MEDIUM	0,24 x 1,7 mm	bleu
S-PL	SEIRIN® PYONEX LARGE	0,26 x 1,8 mm	pourpre
S-PY	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 0,60 mm	jaune
S-PG	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 0,90 mm	vert
S-PB	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 1,20 mm	bleu
S-PP	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 1,50 mm	rose

Importateur exclusif pour l'Europe

3B Scientific GmbH, Rudorffweg 8, 21031 Hamburg, Germany

Toutes les aiguilles d'acupuncture SEIRIN® possèdent les avantages suivants :

- Des pointes polies trois fois
- Un contrôle qualité des plus exigeants
- Un nettoyage par électrolyse
- Une stérilisation au gaz EO (Oxyde d'éthylène)
- Une conservation d'au moins 3 ans

Vue d'ensemble de toutes les aiguilles d'acupuncture SEIRIN® au verso

